

Xiaomi Massage Gun Mini Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Omezení při používání

- Masážní pistoli nepoužívejte na hlavu, obličej, lokty, kolena a jiné klouby, páteř nebo jiné oblasti s minimálním pokrytím svalů.
- Masážní pistoli nepoužívejte na boční, přední nebo zadní části krku (krční obratle), aby nedošlo k poranění. Mohlo by dojít k mdlobám a zástavě srdce.
- Masážní pistoli nepoužívejte na podpaží, vnitřní stranu paže, vnitřní stranu klíční kosti, vnitřní stranu lokte, zadní stranu kolene, břicho, oblast ledvin, genitálie nebo jiné citlivé oblasti s hustým výskytem nervů a cév.
- Masážní pistoli nepoužívejte pod břichem u osob s onemocněním močových cest, jako jsou ledvinové kameny, močododové kameny, kameny v močovém měchýři, kameny v močové trubici, infekce močových cest apod.
- Masážní pistoli nepoužívejte na oblasti těla s modřinami, povrchovými ranami, lokální horečkou, červenými otoky nebo nepříjemnými pocity, inflamací, svalovými křečemi, svalovými ranami, akutními výrony, pohmožděninami a natažením.
- Masážní pistoli nepoužívejte, pokud se po náročném cvičení objeví příznaky jako horečka, nevolnost, zvracení nebo svalová bolest či slabost, a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Masážní pistoli nepoužívejte u osob s následujícími onemocněními: kardiovaskulární a cerebrovaskulární onemocnění, krevní choroby, poruchy koagulace, trombotická purpura, krční plaky, křečové žíly, žilní trombóza, rakovina, nádory a duševní onemocnění.
- Masážní pistoli nepoužívejte u osob se zlomeninami nebo kovovými implantáty.
- Masážní pistoli nepoužívejte během jízdy nebo při přesných činnostech.
- Masážní pistoli nepoužívejte nepřetržitě po delší dobu, abyste předešli poškození svalů způsobenému nadměrnou masáží.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření

- Během provozu neumísťujte prsty, vlasy ani jiné části těla do blízkosti kloubu mezi masážní hlavou a ústím masážní pistole, aby nedošlo k jejich přiskřípnutí.
- Do drážky masážní hlavy ani do nabíjecího otvoru nevkládejte cizí předměty. V opačném případě může dojít k popálení nebo úrazu elektrickým proudem, případně ke vzniku požáru v důsledku zkratu.
- Masážní pistoli neponořujte do vody ani do jiných tekutin.
- Masážní pistoli nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nabíjejte a používejte ji při okolní teplotě 0 °C až 35 °C.
- Masážní pistoli uchovávejte mimo dosah zdrojů vody a filtrů a korozivního prostředí, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie.
- Nepokoušejte se masážní pistoli sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.
- Masážní pistoli během nabíjení nepoužívejte.
- K nabíjení používejte originální napájecí adaptér a originální napájecí kabel v souladu se specifikacemi uvedenými v uživatelské příručce.
- Po úplném nabití odpojte masážní pistoli od nabíječky.
- Pokud jste masážní pistoli delší dobu nepoužívali, před použitím ji nabijte.
- Masážní hlavice je částečně vyrobena ze silikonu. Osoby alergické na silikon by neměly používat kulatou hlavici a hlavici ve tvaru písmene U, doporučujeme používat plochou hlavici.

Skupiny, které se nehodí pro používání této masážní pistole

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Pokud nastane některý z následujících stavů, poraďte se před použitím s ošetřujícím lékařem nebo chirurgem v nemocnici a po obdržení povolení výrobek používejte jen pod dohledem.

- Těhotné ženy nebo ženy, které právě porodily.
- Lidé starší 60 let.
- Lidé s rabdomyolýzou.
- Lidé s chybějícími končetinami nebo paraplegici.
- Lidé s kardiostimulátory nebo stenty.
- Lidé, kteří v posledních 12 měsících podstoupili operaci.
- Lidé se zhoršeným vnímáním končetin nebo pohyblivostí z důvodu nemoci nebo věku. Lidé s narušenou páteří, klouby nebo kostmi nebo trpící ortopedickými onemocněními, jako je osteoporóza, krční spondylóza a výhřez bederní ploténky.
- Lidé s jakýmkoliv komplikacemi souvisejícími s nemocí (jako je neuropatie nebo poškození sítnice).
- Lidé s onemocněním močových cest, jako jsou ledvinové kameny, močové kameny, kameny v močovém měchýři, kameny v močové trubici nebo infekce močových cest.

Další bezpečnostní opatření

- Masážní pistoli nepouštějte na zem, netřeste s ní ani do ní nebouchejte. Silné nárazy mohou poškodit součásti nebo způsobit nesprávný provoz. Pokud k tomu dojde, obraťte se včas na poprodejní servis.
- Dlouhodobé používání masážní pistole může způsobit zvýšení její povrchové teploty, což může vést k jejímu poškození. Nepoužívejte ji proto příliš dlouho.
- V případě, že se masážní pistole zahřívá, kouří se z ní, nadměrně bzučí apod., okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.
- Pokud se masážní pistole během používání přehřeje nebo zdeformuje, nabobtná nebo vyteče baterie, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.

Vyjmutí baterie

VAROVÁNÍ

Po vyjmutí baterie již nebude možné masážní pistoli používat.


Následující kroky by měly být provedeny až po trvalé likvidaci masážní pistole. Nerozebírejte masážní pistoli sami za účelem běžné údržby.

1. Odpojte masážní pistoli od zdroje napájení a sundejte kryt.
2. Postupně odřízněte kabely spojující baterii, motor a NTC.
3. Vyjměte baterii a pomocí izolačního lepidla utěsněte přerušené konce kabelů.
4. Baterii zlikvidujte v určeném recyklačním zařízení a dodržujte při tom všechny místní zákony, předpisy a pokyny na ochranu životního prostředí.

UPOZORNĚNÍ

- Před likvidací masážní pistole je nutné z ní vyndat baterii.
- Před vyjmutím baterie odpojte masážní pistoli od napájení.
- Masážní pistoli smí demontovat pouze odborník.

1. Masážní pistole

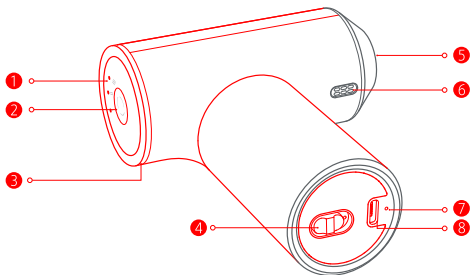

1 Indikátory rychlosti

3 Indikátor tlakového senzoru

5 Hrdlo (pro instalaci masážní hlavice)

7 Indikátor nabíjení

2 Tlačítko rychlosti

4 Tlačítko zapnutí/vypnutí


6 Ventilační otvor pro odvod tepla

8 Nabíjecí port


Používání masážní pistole

- Zmírňuje pozdější svalovou bolestivost po cvičení a uvolňuje ztuhlé svaly.
- **Zmírnění bolesti svalů nebo ztuhlosti zad a ramen způsobené dlouhodobým sezením a špatným držením těla.**
- **Každodenní masáže pomáhá uvolnit svaly.**


2. Seznam příslušenství výrobku

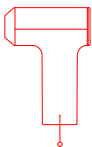

Masážní pistole

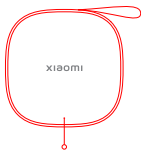

Úložné pouzdro

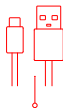


Rychlonabíjecí kabel



Uživatelská příručka




Kulatá hlavice

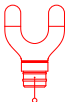

Hlavice ve tvaru písmene U



Plochá hlavice

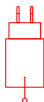

Napájecí adaptér



Oznámení o záruce


- Kulatá hlavice: Vhodná pro masáž větších svalových skupin, jako jsou ramena, pas, paže, boky, stehna a lýtka.
- Hlavice ve tvaru písmene U: Vhodná k masáži zad, po stranách páteře a lýtek.
- Plochá hlavice: Vhodná pro uvolnění všech svalů.

Poznámka

Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Montáž

1. Instalace masážní hlavice

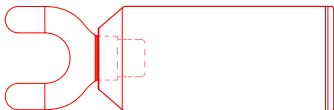

- 1 Nainstalujte vhodnou masážní hlavici pro požadovaný typ masáže.
- 2 Při instalaci masážní hlavice zatlačte základnu masážní hlavice silou do ústí masážní pistole a dbejte na to, aby linie na hlavici byla ve stejné poloze jako ústí.

⚠ Poznámka

Červená čára na obrázku představuje schematickou čáru pro instalaci, zatímco na skutečném výrobku se jedná o lesklý povrch.

2. Demontáž masážní hlavice

Při demontáži masážní hlavice držte masážní hlavici a otáčejte jí proti směru hodinových ručiček, přičemž ji táhněte směrem nahoru od ústí.

⚠ VAROVÁNÍ

Masážní hlavici instalujte a demontujte, když je masážní pistole vypnutá, a před zapnutím masážní pistole se ujistěte, že je masážní hlavice správně nainstalována. Masážní hlavici během používání nenastavujte, neinstalujte ani neodstraňujte, aby nedošlo k jejímu přiskřípnutí.

Používání

1. Nabíjení

- Vypněte masážní pistoli, zapojte napájecí kabel do napájecího portu a poté ji připojte ke zdroji napájení. Během nabíjení nelze masážní pistoli zapnout.
- Pokud je napájecí kabel připojen ke zdroji napájení a zasunut do nabíjecího portu masážní pistole, když je zapnutá, automaticky se vypne a začne se nabíjet.

2. Zapnutí/vypnutí/přepínání režimů



Zapnutí: Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ve spodní části na stranu "I" (červená indikační značka bude odkrytá), tři indikátory rychlosti se rozsvítí současně. Po jednom bliknutí se současně rozsvítí indikátory rychlosti 2 a 3 a indikátor rychlosti 1 zůstane svítit. Po stisknutí tlačítka rychlosti se masážní pistole spustí na rychlosti 1. Po 15 minutách nepřetržitého používání přejde masážní pistole do inteligentního pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka rychlosti ji znovu spustíte. (Masážní pistole se automaticky vypne, pokud není po dobu 10 minut provozována. Ručním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na stranu "O" masážní pistoli znovu spustíte).

Vypnutí: Po zapnutí masážní pistole stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na spodní straně do polohy "O" (červená indikační značka je skrytá), ukazatel aktuální rychlosti zhasne a masážní pistole se vypne.

Nastavení rychlosti: Stisknutím tlačítka rychlosti změníte rychlost.

Tři indikátory odpovídají třem různým rychlostem: Rychlost 1, Rychlost 2 a Rychlost 3.

Pozastavení: Dvojným stisknutím tlačítka rychlosti masážní pistoli pozastavíte, opětovným stisknutím ji znovu spustíte. Masážní pistole se automaticky vypne, pokud ji nepoužíváte po dobu 10 minut od pozastavení. Ručním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na stranu "O" masážní pistoli znovu spustíte.

Funkce opětovného spuštění po zablokování a zastavení: Pokud na masážní pistoli příliš tlačíte, aktivuje ochranu zablokování a zastavení. Opětovným stisknutím tlačítka rychlosti se masážní pistole znovu spustí s výchozí rychlostí 1.


3. Indikátory

1 Indikátory rychlosti



Ukazatele rychlosti odpovídají Rychlosti 1, Rychlosti 2 a Rychlosti 3 zleva doprava. Když procházíte rychlostmi, jejich příslušné indikátory budou svítit bíle.

2 Indikátor tlakového senzoru

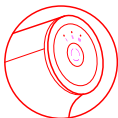


Bílá



Oranžová

- Pokud světelný kroužek nesvítí, znamená to, že intenzita masáže je nízká a masážní účinek je velmi slabý. Intenzitu lze nastavit podle potřeb uživatele.
- Pokud světelný kroužek svítí bíle, znamená to, že intenzita masáže je střední a je aplikován normální masážní účinek. Intenzitu lze nastavit podle potřeb uživatele.
- Pokud je světelný kroužek oranžový, je intenzita masáže vysoká. Intenzitu lze nastavit podle potřeb uživatele, aby nedošlo k poškození svalů v důsledku nadměrného tlaku.

3 Indikátor nabíjení

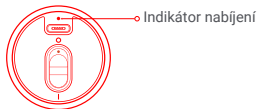

- Červené nádechy: Baterie je nabitá na méně než 20 %, nabijte ji včas.
- Bílé nádechy: Nabíjení.
- Indikátor během nabíjení zhasne: Baterie je plně nabitá, odpojte ji od zdroje napájení. Pokud nabíjíte masážní pistoli, když je plně nabitá, indikátor po 20 sekundách dýchání zhasne.

4. Používání masážní pistole

- Nainstalujte vhodnou masážní hlavici, zapněte masážní pistoli a zvolte vhodnou rychlost podle osobních preferencí. Doporučujeme začít s nízkou rychlostí.
- Jemně přitlačte masážní hlavici ke svalům, které potřebují uvolnit, a pomalu pohybujte dopředu a dozadu. Pokud se jedná o obzvláště bolestivou oblast, přiměřeně přitlačte na místo, které je citlivé, a vydržte tam po dobu 15-30 sekund.
- Masážní pistole vyvíjí tlak, a proto se nedoporučuje využívat na masážní pistoli nadměrně tlačit, aby nedošlo k poškození svalů nebo kostí.
- Doporučuje se používat na místa s dostatečným svalovým pokrytím a nezůstávat na stejném místě déle než 60 sekund.
- Doporučená doba používání je 10 minut. Pokud stále pociťujete bolest, můžete dobu masáže přiměřeně prodloužit.
- Doporučená doba jednoho použití by neměla přesáhnout 15 minut a doba nepřetržitého používání by neměla přesáhnout 30 minut.

1. Čištění

- Masážní pistoli a masážní hlavice pravidelně otírejte čistým, mírně navlhčeným měkkým hadříkem nebo vlhkým ubrouskem a před uložením zpět do úložného pouzdra nebo krabice je osušte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou.
- Masážní hlavice neoplachujte ve vodě a nevystavujte je přímému slunečnímu záření.
- Při čištění se ujistěte, že je masážní pistole vypnutá a odpojená od sítě.
- K čištění masážní pistole nepoužívejte žíravé kapaliny, protože by mohlo dojít k poškození nebo popraskání masážní pistole nebo ke změně její barvy.

2. Skladování

- Masážní pistoli skladujte na chladném a suchém místě.
- Neskladujte masážní pistoli v prostředí s teplotou nad 40 °C nebo pod -10 °C. Uchovávejte ji mimo dosah vlhkosti, zdrojů vody nebo filtrů a korozivního prostředí, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie.
- Masážní pistoli lze uložit do dodaného pouzdra pro skladování nebo cestování.
- S masážní pistolí nebouchejte, netlačte na ni, nepouštějte ji na zem, neházejte s ní ani ji nepoškrábejte.
- Masážní pistoli lze převážet v autech, vlacích, lodích i letadlech. Při přepravě by měla být zajištěna na místě směrem nahoru, aby nedošlo k jejímu poškození v důsledku stlačení, vibrací, nárazů, převrácení nebo pádu.
- Pokud jste masážní pistoli delší dobu nepoužívali, před použitím ji nabijte.
- Pokud se masážní pistole během skladování přehřeje nebo zdeformuje, nabobtná nebo jí vyteče baterie, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte poprodejní servis.

Odstraňování problémů

Problémy	Možná příčina	Řešení
Indikátor se během nabíjení nerozsvítí.	Napájecí adaptér není k masážní pistoli správně připojen.	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen.
	Po úplném nabití masážní pistole indikátor nabíjení standardně zhasne.	Masážní pistoli lze normálně používat.
Baterie se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí do normálu, a pak pokračujte v používání.
Masážní pistole nefunguje.	Masážní pistole je vybitá nebo má slabou baterii.	Masážní pistoli před použitím nabijte.
	Dochází k zablokování a zastavení masážní pistole v důsledku nadměrného tlaku.	Masážní pistoli restartujte.
Motor vydává neobvyklé zvuky.	Do motoru se dostal cizí předmět.	Kontaktujte poprodejní servis a domluvte se na údržbě.
	Došlo k chybě motoru.	Kontaktujte poprodejní servis a domluvte se na údržbě.
Teplota masážní pistole je příliš vysoká.	Doba používání je příliš dlouhá.	Před dalším použitím vyčkejte, až se teplota masážní pistole vrátí do normálu. Doporučená doba jednoho použití by neměla přesáhnout 15 minut a doba nepřetržitého používání by neměla přesáhnout 30 minut.

Poznámka: Pokud některý z výše uvedených problémů přetrvává, kontaktujte prosím poprodejní servis.

Prohlášení o shodě EU

CE My, společnost Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd., tímto prohlašujeme, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a jejich změnami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla kombinovat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalatéra nebo místních úřadů.

Specifikace

Název: Xiaomi Massage Gun Mini

Model: XMFG-M352

Rozměry produktu: 101 x 139 x 45 mm

Čistá hmotnost: 380 g

Jmenovitý příkon napájecího adaptéru: 100 - 240 V ~ , 0.6 A

Jmenovitý výstup napájecího adaptéru: 5.0 V=3 A 15W 9.0 V=2.23 A 20.0 W
12.0 V=1.67 A 20.0 W 10.0 V=2.25 A Max. 22.5 W Max.

Jmenovitý vstup masážní pistole 1: 9 V = 1,5 A (pro rychlé nabíjení)

Jmenovitý vstup masážní pistole 2: 5 V = 2 A (pro běžné nabíjení)

Kapacita baterie: 2 600 mAh

Typ baterie: Dobíjecí lithium-iontová baterie

Provozní teplota: 0 °C až 35 °C

Provozní vlhkost: 10 % až 85 % RH

Datum výroby: viz obal

Vyrobena pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Unit 1201-1203, Youte Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong, China

Pro více informací navštivte stránky: www.mi.com

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:

AT Computers a.s.

Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 61672599